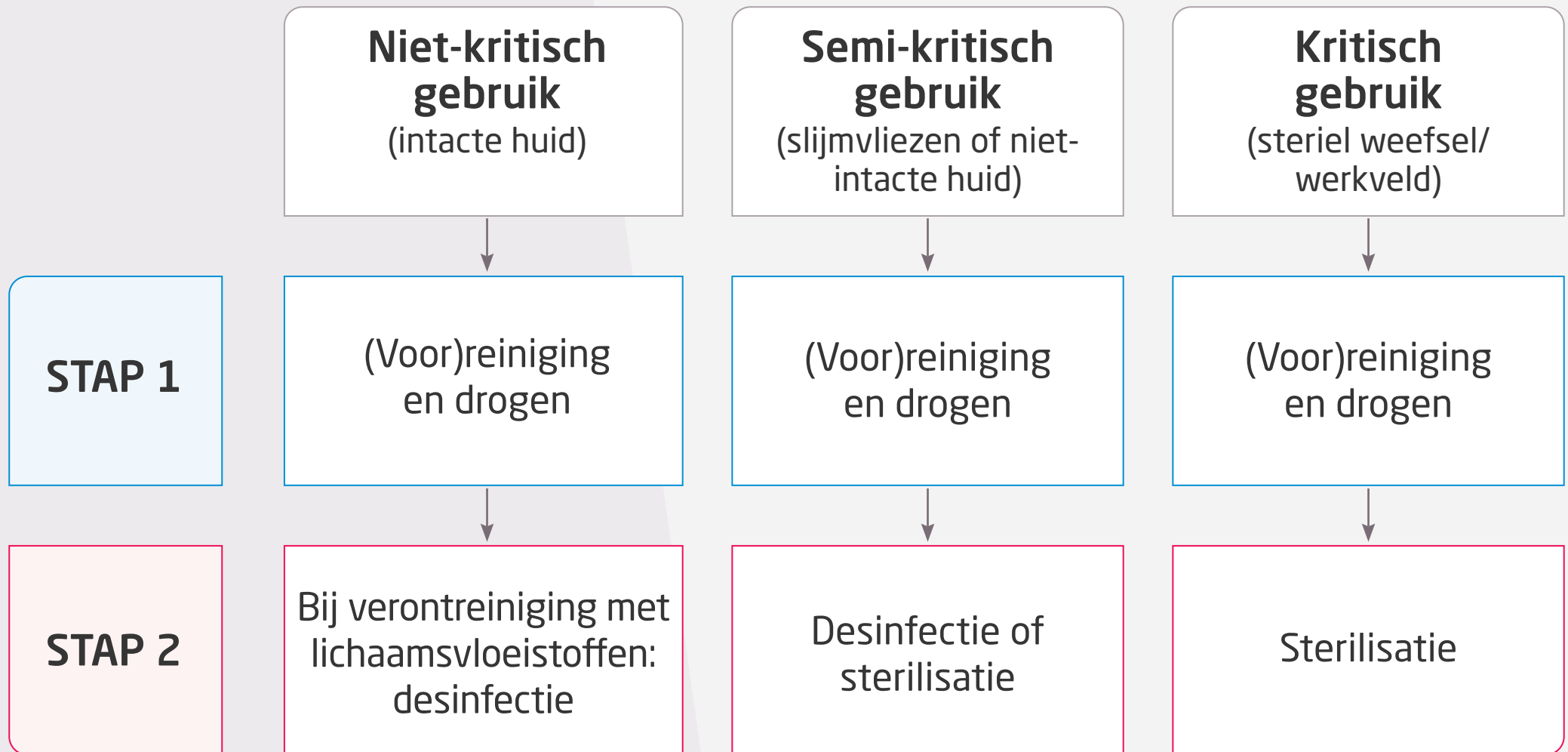




- Voorreiniging: bij zichtbaar vuil op instrumentarium direct het vuil afvegen of afspoelen met kraanwater.
- Reiniging: machinale reiniging of handmatig met instrumentreinigingsmiddel. Reinig niet-kritisch, semi-kritisch en kritisch instrumentarium.
- Desinfectie: bij niet-kritisch instrumentarium alleen nodig bij verontreiniging met lichaamsvloeistoffen. Desinfecteer semi-kritisch instrumentarium, tenzij gekozen wordt voor sterilisatie.
- Sterilisatie: bij kritisch instrumentarium en vaginale specula.